

تم وصف العلاج لك

علاج مانع

Budesonid Easyhaler®

Beclomet® Easyhaler®

علاج ملطف

Buventol® Easyhaler®

Formoterol Easyhaler®

علاج توليفة

Bufomix® Easyhaler®

ORION
PHARMA



Easyhaler®

إرشادات الاستعمال

تجهيز البخاخة

أخذ الدواء من خلال مسحوق بخاخة أمر في منتهى السهولة. تعرف على كيفية استعمال البخاخة بعناية.

- أخرج البخاخة من الجيب الصفيح الخاص بها.
- افتح الغطاء الواقي لها وأدخل البخاخة في الغطاء. يعمل الغطاء عن الأتربة الموجود على بوق البخاخة على إيقاف تشغيل الجهاز.
- احرص على إغلاق الغطاء الواقي في حالة عدم أخذ العلاج في الحال.



غطاء عن الأتربة

البوق

أخذ العلاج

١ افتح الغطاء الواقي وأزل غطاء الأتربة من البوق.

٢ رج البخاخة من ٣ إلى ٥ مرات في الوضع الرأسي.

٣ قم بتحميل الجرعة بالضغط على البخاخة بين الإبهام والسبابة. عند سماع صوت نفرة أزل قبضتك عليها. الآن الجرعة جاهزة للاستنشاق.

٤ أخرج الزفير بشكل طبيعي، ثم ضع البوق بين أسنانك. أغلق شفتيك حول البوق بإحكام. خذ نفساً عميقاً وقويا قدر المستطاع. أخرج البخاخة من فمك وتنفس خارج البخاخة بشكل طبيعي.

إذا نصحك الطبيب بأكثر من جرعة، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.



٤


ملاحظة: لا يمكن وضع أكثر من جرعة في البخاخة. في حالة وضع أكثر من جرعة في البخاخة بطريق الخطأ، فقم بإزالة المسحوق بنقر البوق على راحة اليد أو أي سطح آخر. ٢- ثم واصل الخطوات بدءاً من الخطوة ٢.

تجنب إخراج الزفير في البخاخة، فقد تؤدي رطوبة الزفير إلى تلف المنتج.

٥ احرص على إبقاء البخاخة دائماً مغطاة بالغطاء الواقي.

٦ احرص على مضمضة الفم والحلقوم بالماء، ثم بصق الماء.

في حالة أخذ علاج ملطف وعلاج معاً في نفس الجرعة، فخذ العلاج الملطف أولاً.

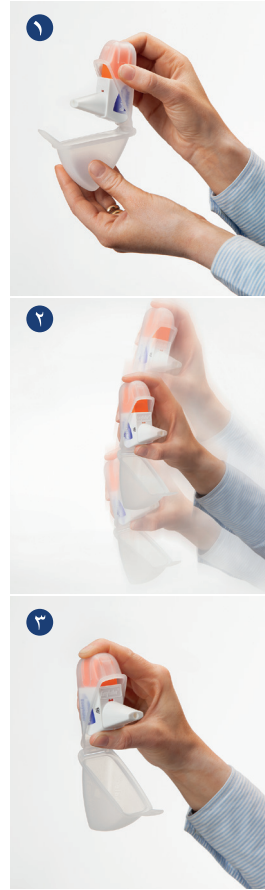

١

٢

٣



٥

استبدل البخاخة بأخرى جديدة إذا أظهر العداد

يحتوي Easyhaler على ٦٠ أو ١٠٠ أو ١٢٠ أو ٢٠٠ جرعة. يعرض العداد على جانب البخاخة عدد الجرعات المتبقية. يتغير العدد الذي يظهر على العداد باستنشاق عشر جرعات. يظهر لون أحمر على البخاخة عندما يصل عدد الجرعات المتبقية إلى ٢٠ جرعة. تبقى كمية قليلة من المسحوق في البخاخة الفارغة، وينصح بعدم استعمالها. استبدل البخاخة بأخرى جديدة إذا أظهر العداد ٠.

ينصح بإعادة البخاخات المستعملة إلى الصيدلية للتخلص منها بطريقة آمنة.

التنظيف والتخزين

ينصح بوضع البخاخة في الغطاء الواقي لها. نظف البوق مرة واحدة أسبوعياً على الأقل بقطعة قماش جافة وناعمة. يمنع استعمال الماء في التنظيف. احرص على تخزين البخاخة في درجة حرارة الغرفة وعلى إبعادها عن مصادر الرطوبة.



عداد الجرعات

احرص على إبقاء غطاء الوقاية لاستعماله من Easyhaler جديد.