




## Din adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi

# Emerade är din livförsäkring vid anafylaxi

Emerade är en adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi (allergisk chock). Anafylaxi kan man få av insektsstick, födoämnen eller läkemedel. Den kan också utlösas av ansträngning eller ha okänd orsak. Emerade motverkar symtomen vid en anafylaxi.

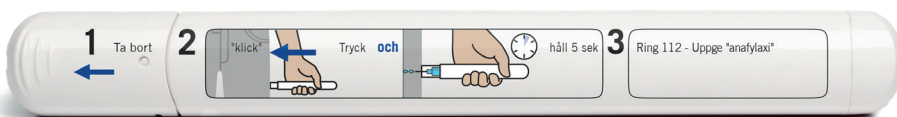

1. Ta bort locket
2. Placera Emerade mot lårets utsida i 90° vinkel. Tryck ordentligt så att nålskyddet trycks in. Ett klick hörs när Emerade har aktiverats och injektionen går in i låret.  
**och**  
Håll Emerade med stadigt tryck mot låret i 5 sekunder.  
Massera injektionsstället lätt efteråt.
3. Ring 112, be om en ambulans och uppge "anafylaxi" även om du börjar känna dig bättre.

I väntan på ambulans bör du ligga ner med fötterna upp. Om detta gör dig andfädd, så kan du sitta upp. Om du kan, sök hjälp omedelbart efter att du har använt din Emerade. Be någon stanna hos dig tills ambulansen kommer.



Se instruktionsvideo och läs mer om anafylaxi på [emerade.com/se](https://emerade.com/se)

## Då använder du Emerade

Symtom på en akut allergisk reaktion kan uppträda inom några minuter efter kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Symtom:

- Klåda, speciellt under fötterna, i händerna eller på huvudet
- Stickande känsla i munnen
- Svullnad i munnen och halsen, på läpparna och ögonen
- Klåda, rodnad eller nässelutslag var som helst på kroppen
- Yrsel, ångest, kallsvettning
- Magsmärtor, illamående och kräkning
- Andnöd eller astmasymtom
- Plötslig svaghet, blodtrycksfall, svimning
- Förvirring eller förlorat medvetande

**Kritiska symtom:** Det är svårt att andas, din mun och ditt svalg sväller upp, du blir plötsligt trött och yr eller du känner en stadig försämring. Om du får dessa symtom, använd då Emerade omedelbart. Ring 112 och be om ambulans.

Adrenalin motverkar blodtrycksfallet, stimulerar hjärtat och förbättrar andningen.

Bär alltid med dig Emerade om du riskerar att komma i kontakt med ämnen som du är allergisk mot.

## Tveka inte att använda Emerade

Använd Emerade omedelbart vid tecken eller symtom på en akut allergisk reaktion. Följ din läkares instruktioner.

Tveka inte att använda din Emerade, även om du inte är säker på om du har anafylaxi. Emerade kan rädda ditt liv. Emerade ger en dos och kan inte återanvändas.

Om pennan inte aktiverar, gör då ett nytt försök med högre kraft.

Det är viktigt att du läser bipacksedeln, speciellt varningar och försiktighet.

## Säkerställ att din penna har aktiverats

Efter att ha använt Emerade kan du försäkra dig om att din adrenalinpenna har aktiverats.

Om nålskyddet inte har förlängts har Emerade inte aktiverats.



Oanvänd Emerade (före aktivering) har nålskyddet i sitt normala läge.



Emerade som har aktiverats har ett förlängt nålskydd.

Pilen på etiketten anger var etiketten kan lyftas för att visa inspektionsfönstret.

Om inspektionsfönstret visar klar vätska har dosen inte levererats.

En Emerade som har aktiverats och har levererat adrenalin dosen kommer att visa en färgad kolv i inspektionsfönstret.



Gul kolv  
i Emerade  
150 µg

Grön kolv  
i Emerade  
300 µg

Blå kolv  
i Emerade  
500 µg

Om aktiveringen av din Emeradepenna misslyckas, ska du omedelbart försöka igen genom att använda ökad kraft när pennan trycks mot det avsedda injektionsstället. Om din injektion inte lyckas, ska du omedelbart använda din andra penna.

## Ny dos efter 5 till 15 minuter

Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en akut allergisk reaktion. Din läkare kan därför rekommendera att injektionen upprepas efter 5–15 minuter med en ny Emerade. Du rekommenderas därför att alltid ha med dig mer än en Emerade.

## Rekommenderad dos

Emerade finns i tre doser: 150, 300 och 500 mikrogram. Din läkare bestämmer lämplig dos för dig.

## Förvaring

Emerade tål kyla men låt den inte frysa (0°C). Förvaras i högst 25°C.

Om du har en träningspenna, förvara den separat från Emerade.

Förvara Emerade i skyddsfodralet av plast som medföljer. Plastfodralet som innehåller pennan/pennorna kan förvaras i ytterkartongen.

## Undersök adrenalinnet

Kontrollera lösningen regelbundet, genom att lyfta etiketten över visningsfönstret på adrenalinpennan, för att säkerställa att lösningen är klar och färglös. Om lösningen är missfärgad eller innehåller en fällning (partiklar), kassera pennan och kontakta läkare för att få en ny Emerade.

## Enkel

Emerade har ett stort hål där nålen kommer ut och inget hål i bakänden. Du vet instinktivt vilken ände som du ska trycka mot låret.

## När du flyger

Du kan ta med dig Emerade i handbagaget. För säkerhets skull kan du be din läkare att skriva under ett reseintyg. Blankett finns på [emerade.com/se](http://emerade.com/se).



Beställ gratis fodral på [emerade.com/se](http://emerade.com/se)

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Fimea på [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) eller till Medeca Pharma AB.

## Medeca Pharma AB

Box 24005, 75024 Uppsala  
[www.emerade.com/se](http://www.emerade.com/se)

Tel 018-25 85 30  
[www.medeca.se](http://www.medeca.se)

Fax 018-24 71 53  
[info@medeca.se](mailto:info@medeca.se)